

bcg

MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

MODELO MPF-300



CÓMODAS, LIVIANAS Y REUTILIZABLES

COBERTURA SUPERIOR Y FRONTAL

Protege ojos, nariz y boca. Permite el uso de lentes y barbijo.

REUTILIZABLE

Sanitizable con agua clorada y/o alcohol.

REFORZADA

Visera compacta, visor cristalino.

Cómoda y liviana.

Contenido

- 1 Placa visor de PET 300 micrones, ultra cristalino.
- 1 Vincha de PVC liso, sin poros, para protección superior.
- 3 Broches clip de presión.
- 2 Bandas elásticas.
- 1 Nuquera flexible de PVC ranurada para un fácil ajuste a medida.




Recomendaciones de Armado

- 1 Sanitizá.**
El embalaje y su contenido.
Lavá y enjuagá bien tus manos.



- 2 Armá tu máscara.**
Quitá las protecciones del visor frontal y fijala a la vincha usando los clips.

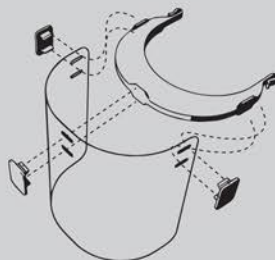

- 3 Ajustala.**
Usá las bandas elásticas y el soporte ranurado para ajustarla a tu medida. Tiene que quedarte firme y cómoda.



Cuidado al quitarla, que su parte exterior no toque tus ojos, nariz o boca. Sanitizá con agua clorada y/o alcohol periódicamente.

www.BCGGROUP.com.ar